


Full Body Sling & Full Body Sling Net



Delade ben
Bakåtlutad
Nackstöd

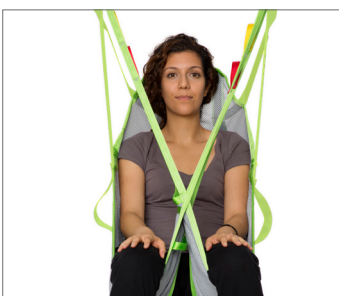

Full Body Sling är en bekväm sele utan förstärkningar, handtag eller stoppning. Den finns i antingen polyester eller polyesternät och ger bra stöd för hela kroppen. Helkroppsselen kan användas för de flesta lyftsituationer och passar de flesta patienter.

Mångsidig design

Våra Full Body Slings är designade för att skapa en tillbakalutad sittställning, vilket är extremt användbart om patienten har dålig bålstabilitet och/eller en tendens att överbelasta sig själv (spastisk prestation) eller är hypertonisk. Det tillbakalutade läget förhindrar att användaren glider ur selen. Det förstärkta huvudstödet gör detta till en lämplig lyftsele för att lyfta patienter från en plan yta som t.ex. ett golv.

Två tygval

Full Body Slings finns i antingen polyester- eller polyesternättyg. Båda kan lämnas bakom patienten under en kort tid efter att överföringen är klar.

Polyestertyget med låg friktion är lätt att applicera och ta bort och polyesternätet är idealiskt för de flesta badsituationer.

Easy Care och Easy Fit

Våra selar är tillverkade enligt högsta kvalitetsstandard. De har förstärkta öglor och höghållfasta nylonband runt selen för att göra dem starka nog att motstå även den mest aktiva användningen. Varje lyftseletikett är färgkodad för att säkerställa ett snabbt och enkelt val av rätt lyftsele och remmarna är färgkodade för enkel bestämning av önskad placering.



Tillbehör



Förlängningsband

Används för att förlänga lyftbanden och alternera lyftläge samt att hålla ihop bendelarna. Flera längder. Art. nr. 21180.*



Benpolstring och benstöd

Utmärkt för användare med känslig hud eller som har smärta. Benpolstring, art. nr. 21146-S, M och L. Förstyvade benstöd, art. nr. 25102.



Bygelpolstring

Det polstrade fodralet skyddar användaren från sammanstötningar med lyftbygeln. Ska inte användas i våta miljöer. Art. nr. 50866



Lyftbyglar för

4-punktsupphängning
Art. nr. 55619 Lyftbygel till 4-punktsupphängning i portabel lyft.

Lyftsituationer



Till och från sängen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.



Till och från rullstolen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från rullstolen.



Till och från golvet


Kan placeras över en patient i ryggläge för överföringar och lyft med en taklyft.



Använd vid hygienbesök


Polyester nät fungerar bäst vid hygienbesök. Även polyestermodellen fungerar.

Skötsel och vård

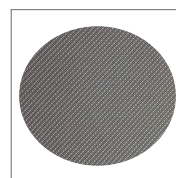


Polyester

Mjukt, tunt material som andas och torkar snabbt. Idealisk för bad eller duschning.

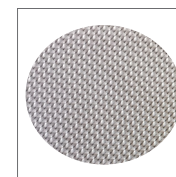

Polyester Nät

Hållbar, låg friktion, lätt att rengöra, applicera och ta bort

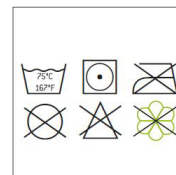

Skötsel

Skötselinstruktioner finns på selens etikett. Använd en tvättpåse godkänd för sjukhustvätt.



Tekniska Specifikationer

Artikelnummer	Storlek	Färg	Model #25005			Model #25010				
			A	B	C	A	B	C		
Polyester Nät	Polyester									
25005-JM	n/a	Junior Medium	JM	22cm / 8.7"	71cm / 28"	80 cm / 31.5"	-	-	-	
25005-S	25010-S	Small	S	26cm / 10.2"	76cm / 29.9"	86cm / 33.9"	31cm / 12.2"	85cm / 33.5"	90cm / 35.4"	
25005-M	25010-M	Medium	M	26cm / 10.2"	85cm / 33.5"	95cm / 37.4"	40cm / 15.8"	92cm / 36.2"	91cm / 35.8"	
25005-L	25010-L	Large	L	34cm / 13.4"	96cm / 37.8"	95cm / 37.4"	40cm / 15.8"	98cm / 38.6"	100cm / 39.4"	
25005-XL	25010-XL	Extra Large	XL	36cm / 14.2"	105cm / 41.3"	106cm / 41.7"	44 cm / 17.3"	105cm / 41.3"	102cm / 40.2"	
n/a	25010-XXL	Double Extra Large	XXL	-	-	-	44 cm / 17.3"	111cm / 43.7"	106cm / 41.7"	
n/a	25010-XXXL	Triple Extra Large	XXXL	-	-	-	44 cm / 17.3"	118cm / 46.5"	108cm / 42.5"	
Maximal användarvikt	Small to X Large XXL, XXXL	250kg/551lb 300kg/661lb								

* Tillgängliga i flera storlekar: 10cm/3.9" (21180-10), 15cm/5.9" (21180-15), 20cm/7.8" (21180-20), 25cm/9.8" (21180-25), 35cm/13.7" (21180-35)