



Allround-sele
Upprätt sittställning
Medelstor öppning

Polyester Net
Art. Nr: 25045



Polyester
Art. Nr: 25070



Soft Air Mesh
Art. Nr: 25054



Basic Sling

Basic Sling finns i flera bekväma material som anpassar sig efter kroppen. En allround-sele, som passar de flesta lyftsituationer. Ett bra val även när det är okänt vem som kommer att använda lyftselen.

Tre materialval

Basic Sling finns i tre val – Polyester, Polyester Nät och Soft Air Mesh. Soft Air Mesh och Polyester Nät tillåter fukt och värme att effektivt transporteras bort från användaren, vilket gör att lyftselen kan lämnas med användaren under en kort tid efter att förflyttningen är klar. Däremot kan inte modellen i polyester lämnas kvar med användaren. Vid vistelse i till exempel badmiljöer, är Polyester Nät ett utmärkt val, eftersom det är ett luftigt material, som torkar snabbt.

Upprätt sittställning

Våra Basic Slings erbjuder bra stöd för hela ryggen. Polyester- och polyester nätselarna har dessutom förstyvade bendelar. De är lämpliga för patienter med mindre bra bålstabilitet och upprätt sittställning. Detta är särskilt användbart

för att säkerställa korrekt positionering vid placering i rullstol eller andra sittytter. Basic Slings kan användas med 2-punkts, 3-punkts- eller 4-punktsupphängning, något som gör att de kan anpassas till flera olika behov.

Användarvänliga detaljer

Våra selar tillverkas enligt den högsta kvalitetsstandarden. De har förstärkta lyftöglor och vävda nylonband med hög hållfasthet runt selen, för att göra dem tillräckligt robusta och för att motstå även en mest aktiva användningen. Etiketten på selen är färgkodad, för att säkerställa ett snabbt och enkelt val av rätt storlek på selen. Lyftöglorna har färgkoder, för att enkelt hitta fram till önskad positionering.



Tillbehör



Förlängningsband

Används för att förlänga lyftbyglarna för att kunna anpassa lyftposition eller för att hålla ihop bendelar. Olika längder. NR.:21180.*



Benpolstring och benstöd

Utmärkt för användare med känslig hud eller som har smärta. Benpolstring, art nr. 21146-S, M och L. Förstuvade benstöd, art. nr. 25102



Bygelpolstring

Det polstrade fodralet skyddar användaren från sammanstötningar med lyftbygeln. Ska inte användas i våta miljöer. Art. nr. 50866



Lyftbyglar för 4-punktsupphängning

Art. nr. 55619 Lyftbygel till 4-punktsupphängning i portabel lyft. Art. nr. 92938 4-punktsbygel till stationär lyft.

Lyftsituationer



Till och från sängen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.




Till och från rullstolen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från rullstolen.



Använd från golvet


Fungerande vid förflyttning från golvet.

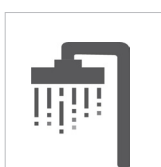

Använd vid duschning

Bara Polyester Nät kan användas för detta.

Skötsel

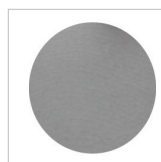


Polyester

Hållbar, låg friktion, lätt att rengöra, applicera och ta bort.




Polyester Net

Mjukt, tunt material som andas och torkar snabbt. Idealisk för bad eller dusch.

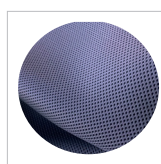

Soft Air Mesh

Lätt, svalt och ventilerande material som fungerar väl för kunder med känslig hud.

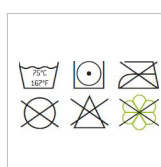


Skötsel

Skötselinstruktioner lokerade på etikett. Använd som sjukhus gradstätt.

Tekniska specifikationer

Artikelnummer			Storlek	Färg	A	B	C
Polyester nät	Soft Air Mesh	Polyester					
25045-JS	25054-JS	25070-JS	Junior Small	JS	22 cm	62 cm	50 cm
25045-JM	25054-JM	25070-JM	Junior Medium	JM	28 cm	65 cm	54 cm
25045-S	25054-S	25070-S	Small	S	35 cm	77 cm	58 cm
25045-M	25054-M	25070-M	Medium	M	40 cm	88 cm	63 cm
25045-L	25054-L	25070-L	Large	L	44 cm	98 cm	65 cm
25045-XL	25054-XL	25070-XL	X-Large	XL	48 cm	102 cm	70 cm
25045-XXL	ej tillgänglig	25070-XXL	XX-Large	XXL	52 cm	108 cm	74 cm
Högsta användarvikt: 300 kg							

The diagram shows a protective suit with a green mesh border and a grey central panel. Three measurement points are indicated: A is the width of the lower torso, B is the length of the lower leg, and C is the width of the upper torso. The suit has yellow and red accents at the neck and wrist openings.

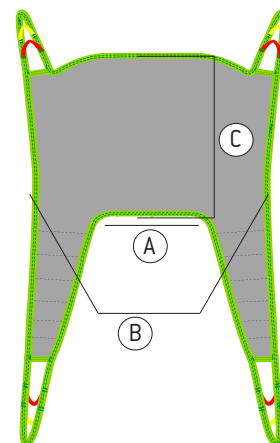

99019 Rev7/SE, Product sheet, Basic Sling, Jan26

*Tillgängliga i följande längder: 10cm/3.9" [21180-10], 15cm/5.9" [21180-15], 20cm/7.8" [21180-20], 25cm/9.8" [21180-25], 35cm/13.7" [21180-35]

“ Vi förbättrar rörelsefriheten
och kvalitetsomhändertagande av människor

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 512 76 7199
info.us@humancaregroup.com