

Carl-Oskar RA

Rebel RA

Staffan RA



Allround



Rebel RA

Med en RA-rollator får brukaren mer stöd än med en vanlig rollator. Namnet kommer av att den utvecklades främst för reumatiker som på grund av smärta, skörhet eller felställning inte kunde stödja på sina händer. RA står för Reumatoid Artrit. Idag används RA-rollatorer av personer som behöver fördela belastningen över hela underarmen istället för på enbart hand och handled, oavsett diagnos. Underarmarna vilar bekvämt på separat inställbara dynor och även handtag inklusive bromshandtag kan vinklas individuellt för bästa möjliga funktion och komfort.

Rebel RA

Ett stabilt gånghjälpmedel för inom- och utomhusbruk. En viss flexibilitet i chassit ger följsamhet mot ojämnheter i underlaget. Rejåla hjul och kullagrade framgafflar ger förutsättningar för trygga och säkra förflyttningar. Den kan förses med tillbehör som korg, käpphållare, enhandsbroms eller släpbroms. Samtliga inställningar görs utan verktyg och den är enkel att fälla ihop vid transport i personbil. Rebel RA finns även med sits.

Staffan RA

är en nätt RA-rollator för inomhusbruk som med sina mindre mått lämpar sig väl där utrymmet är trångt. Separat inställbara underarmsstöd och handtag ger möjlighet för personlig anpassning. Chassits design medger ett gott gångutrymme. Staffan RA kan förses med tillbehören korg, käpphållare eller enhandsbroms. Inställningar och även hopfällning görs helt utan verktyg. Staffan RA finns i 2 höjder.

Carl-Oskar RA

Carl-Oskar RA har samma funktioner som Rebel, ovan, men har större hjul och en högre produktvikt för att ge ett ännu säkrare stöd vid användning utomhus. Både Rebel RA och Carl Oskar RA finns i vardera 2 bredder och 2 höjder.

Utomhus



Carl-Oskar RA

Staffan RA

Smala utrymmen

Tillbehör och funktioner



Bricka

Underlättar förflyttning av saker. Art. nr. 10601.

Passar enbart till RA-rollator med sits.



Steghjälp

Underlättar förflyttningen över hinder.

Art. nr.10612



Lås

För låsning av rollator.

Art. nr. 91092




Släpbroms

Tillbehör som gör rollatorn mindre lätttrullad.

Art. nr.10620

Säljs i par.

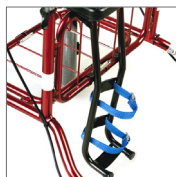

Syrgashållare

Ger säker förvaring av syrgastub.

Art. nr.10615



Reflex-kit

Hjälper dig och din rollator att synas i mörkret.

Art. nr. 91090



Käpphållare

Underlättar medtagandet av käppen.

Art. nr.10603



Korg med handtag

Underlättar vid inköp och utflykter.

Art. nr.10601

Maxvikt: 10 kg



Stänkskydd

Skyddar ben och klädsel.


Art. nr.10608



Enhandsbroms

Möjliggör att styra bromsarna med en hand.

Art. nr.10653

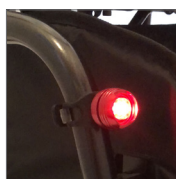

Lamp-kit

Hjälper dig och din rollator att synas i mörkret.

Art. nr. 91091

Tekniska specifikationer

Artikelnamn	Art. nr.	Min. höjd	Max. höjd	Bredd	Hjulstorlek	Vikt	Max brukarvikt
Carl-Oskar RA, Låg 67cm	12315	95 cm	113 cm	67 cm	30 x 5 cm	13.0 kg	125 kg
Carl-Oskar RA, Låg 67cm med sits	12315-1	95 cm	113 cm	67 cm	30 x 5 cm	13.0 kg	125 kg
Carl-Oskar RA, Normal 67cm	12325	107 cm	126 cm	67 cm	30 x 5 cm	13.2 kg	125 kg
Carl-Oskar RA, Normal 67cm med sits	12325-1	107 cm	126 cm	67 cm	30 x 5 cm	13.2 kg	125 kg
Carl-Oskar RA, Låg 72 cm	12415	95 cm	113 cm	72 cm	30 x 5 cm	13.1 kg	125 kg
Carl-Oskar RA, Låg 72 cm med sits	12415-1	95 cm	113 cm	72 cm	30 x 5 cm	13.1 kg	125 kg
Carl-Oskar RA, Normal 72cm	12425	107 cm	126 cm	72 cm	30 x 5 cm	13.3 kg	125 kg
Carl-Oskar RA, Normal 72cm	12425-1	107 cm	126 cm	72 cm	30 x 5 cm	13.3 kg	125 kg
Rebel RA, Låg 67cm	22311	86 cm	104 cm	67cm	20 x 4 cm	11.3 kg	125 kg
Rebel RA, Låg 67cm med sits	22311-1	86 cm	104 cm	67cm	20 x 4 cm	11.3 kg	125 kg
Rebel RA, Normal 67cm	22321	104 cm	122 cm	67 cm	20 x 4 cm	11.5 kg	125 kg
Rebel RA, Normal 67cm med sits	22321-1	104 cm	122 cm	67 cm	20 x 4 cm	11.5 kg	125 kg
Rebel RA, Låg 72 cm	22411	86 cm	104 cm	72 cm	20 x 4 cm	11.4 kg	125 kg
Rebel RA, Låg 72 cm med sits	22411-1	86 cm	104 cm	72 cm	20 x 4 cm	11.4 kg	125 kg
Rebel RA, Normal 72 cm	22421	104 cm	122 cm	72 cm	20 x 4 cm	11.6 kg	125 kg
Rebel RA, Normal 72 cm med sits	22421-1	104 cm	122 cm	72 cm	20 x 4 cm	11.6 kg	125 kg
Staffan RA, Låg 59cm	42221	107 cm	108 cm	59 cm	20 x 4 cm	10.3 kg	90 kg
Staffan RA, Hög 59cm	42231	107 cm	128 cm	59 cm	20 x 4 cm	10.6 kg	125 kg