

Roomer S



Förflyttning från rum-till-rum utan modifiering på dörrkarmar och väggar. Dess portabilitet säkerställer en god investering eftersom samma lyft kan användas i flera rum.

Förflyttning från rum-till-rum utan modifiering på dörrkarmar och väggar

Human Care Roomer S är en portabel taklyft som ger möjlighet att förflytta en patient från ett rum till ett annat utan att göra några modifieringar på dörröppningar och väggar. Dess portabilitet säkerställer en god investering eftersom samma lyft kan användas i flera rum. Taklyften kan användas med antingen 2, 3 eller 4-punkt-supphängning och viktkapaciteten är 220 kg.

En bekväm lyftupplevelse

Tillsammans med vårt utbud av lyftselar erbjuder Roomer S en oslagbar bekvämlighet. Med en Roomer S taklyft minimeras också antalet lyft vilket ökar klientens säkerhet. Roomer S är även lämpad för rum med skjutdörrar eller branddörrar och minskar behovet av vridväxlar.

Konstant lyfthastighet oavsett patientvikt, samt mjuk start och stopp gör lyftet till en behaglig upplevelse. Roomer S erbjuder också två lyfthastigheter, hög batterikapacitet samt enkel batteriladdning via handkontrollen.

Lyftintelligens

Roomer S har en avancerad teknisk plattform som gör det möjligt att mäta användningen av lyften. Med vår data och serviceapplikation samt en dator eller surfplatta kan du ta reda på mer om lyftens användning och skick. Information kan ses direkt i applikationen eller exporteras till andra medier för ytterligare analys.

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone: +46 8 665 35 00
Fax: +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com

Tillbehör och funktioner




2-punktbygel stationära lyftar

2-punktbygel för Roomer S. Finns i 3 bredder, 35 cm, 45cm och 55cm.

Art. nr: 35 cm: 55763

Art. nr: 45 cm: 55751

Art. nr: 55cm: 55764

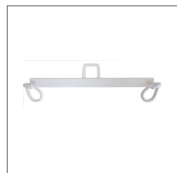

4-punktsupphängning

Tillbehör, 4-punktsupphängning. Möjliggör 4-punktslyft med Altair och Roomer S. Placeras på lyftens bakre krok. Art. nr. 55619




Löpvagn

Human Care erbjuder ett brett sortiment av löpvagnar med krok eller ögla, som kan användas till alla leverantörers skensystem.



Våg

Godkänd för patientvägning upp till 320 kg. Vågen är snabb och enkel att använda och kompatibel med nuvarande ISO och EN-standarder. Vågen kan användas tillsammans med alla Human Cares taklyftar. Den följer direktiven 90/384 EEG, 73/23 EEG och 89/336 EEG och är godkänd för att väga brukare. Art. nr. 50590 till Roomer S.

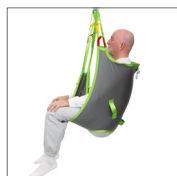

Selar

Human Care erbjuder ett brett sortiment av anatomiskt utformade selar som utvecklats med säkerhet och komfort med patienten i fokus. Sortimentet omfattar flera olika modeller av lyftselar som erbjuds i en mängd olika storlekar. Human Cares selar kan användas för många olika behov.

Lift Interface System

Mjukvårdsgränssnittet - INSIGHTS - är ett lättanvänt webbgränssnitt som kan anslutas till våra överhissar Altair, HeliQ och Roomer S. Det underlättar molnbaserad lagring av insamlade data från lyftaktiviteterna, och gör den tillgänglig från en dator, telefon eller surfplatta. INSIGHTS uppmuntrar till konsekvent användning av lyftutrustning. Detta kan bidra till att minska antalet skador, avsevärt minska kostnaderna och underlätta optimal kapitalförvaltning.

Fördelar för förvaltning

Övervakning av lyftutrustningens användning
Sammanlagda kostnadsbesparingar
Investeringsavkastning

Förmåner för vårdgivare

Fokus på patientens vård och återhämtning
Hjälper till att minska antalet skador
Förbättrar säker hantering av patienter

Fördelar för Biomed / underhåll

Underhåll och service görs enkelt
Underhållskontroll
Lyftanvändningsstatistik
göra förändringar i taket för att installera ett skensystem. Exempelvis vid ett tillfälligt behov av en lyftlösning.

Tekniska specifikationer – Roomer S

Beskrivning	Art. nr.	Lyftkapacitet	Mått [BxHxL]	Vikt	Batteri	Batteriladdare
Roomer S 220 kg inkl. lyft, laddare och hållare för laddare. <i>Lyftbygel är inte inkluderad och måste köpas separat.</i>	55300H-EU	220kg	[BxHxL] 400x160x390mm	9,9kg	2,9 Ah 2x12V	Ingång 100-240 V, AC 50-60 Hz Utgång 27,8V, 0,8A DC
Lyftbygel Roomer S 2-punkt 35 cm	55763	300 kg	[B] 35 cm	1,1 kg		
Lyftbygel Roomer S 2-punkt 45 cm	55751	300 kg	[B] 45 cm	1,3 kg		
Lyftbygel Roomer S 2-punkt 55 cm	55764	300 kg	[B] 55 cm	1,5 kg		

Nödsänkning	Bygel	IP-klass	Lyftdistans	Lifting Speed	
Elektronisk och mekanisk	2, 3, 4-punkt 45 och 55 cm	IPX4, lyft IPX7, handkontroll (Q2 2020)	2080mm	1.8m/ min -lastad 3m/min -olastad	ROHS-2 godkänd Testad och godkänd enligt ISO 10535 ETL-godkänd



We improve freedom of movement
and quality of care for people.