


Hemma eller ute, Rebel är det perfekta valet! Rebel har en flexibilitet i chassit som gör att den är stabil även på ojämna ytor. Rebel är lätt att fälla ihop och rollatorn står stadigt utan stöd i hopfällt läge.



Rebel är en allround rollator av högsta kvalitet. Den är mycket kompakt och enkelt att använda. Rebel är säker och pålitlig och finns i fyra olika bredder samt två höjder. Rebel har en flexibilitet i chassit som gör att den är stabil även på ojämna ytor. Rollatorn är även lätt att manövrera och har ergonomiska handtag för ett bekvämt och ergonomiskt grepp. Brukarvikten är 140 kg.

Kompakt design

Rebel fälls enkelt ihop från sida till sida och kan stå stadigt i ihopfällt läge. Den tar också upp minimalt med plats när den är ihopfälld och kan därför enkelt transporteras. Rebel finns även i en smal modell som endast är 57 cm bred.

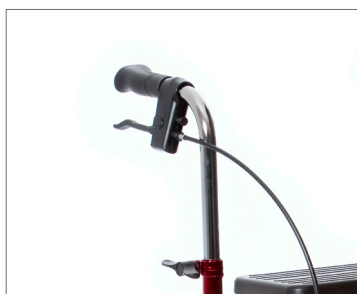

Rebel är lätt att fälla ihop och rollatorn står stadigt utan stöd i hopfällt läge. Rebel finns även som en förstärkt modell med en maximal brukarvikt på 250 kg.

Ergonomiska handtag och enkel bromsning

För att kunna erbjuda dig bästa möjliga ergonomi har handtagen ett stabilt och bekvämt grepp. Den ergonomiska designen säkerställer jämn viktfordelning och handtagen är också justerbara för att du ska hitta det grepp som passar dig.

Perfekt för både inomhus och utomhusbruk

Hemma eller ute, Rebel är det perfekta valet! Rebels flexibilitet i chassit och rejäla hjul gör att den är stabil även på ojämna ytor både inomhus och utomhus.

Tillbehör och funktioner



Bricka

Art. nr: 10651

Passar alla modeller:



Steghjälp

Underlättar förflyttningen över hinder.

Art. nr: 10612



Lås

För låsning av rollator. Art. nr: 91092




Släpbroms

Tillbehör som gör rollatorn mindre lätttrullad.

Art. nr: 10624

Säljs i par.

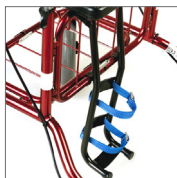

Syrgashållare

Ger säker förvaring av syrgastub.

Art. nr: 10615



Reflex-kit

Hjälper dig och din rollator att synas i mörkret. Art. nr: 91090



Käpphållare

Underlättar medtagandet av käppen.


Art. nr: 10603



Korg med handtag

Underlättar vid inköp och utflykter. Maxvikt: 10 kg

Art. nr: 10601

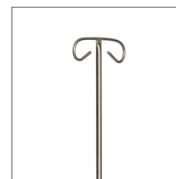

Droppställning

Art nr: 92907



Enhandsbroms


Möjliggör att styra bromsarna med en hand.

Art. nr: 10652




HP-handtag

Underarmsstöd för svag sida & enhandsbroms till motsatt sida (ej till Rebel 57). Art. nr: vänster: 22115, höger: 22116

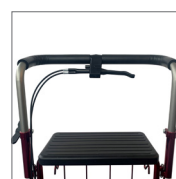

Tvärhandtag

Tvärhandtag med medföljande enhandsbroms. Endast för Rebel 62. Art. nr: vänster 70844, höger 70845

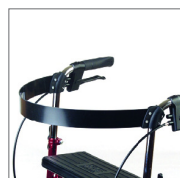

Ryggband

Art. nr: 57 cm, 62cm, 67 cm-modeller: 10621.


Art. nr: 72cm modeller: 10655



Sitsöverdrag

Sitsöverdrag som värmer under vintern och gör sitsen skönare.

Art. nr: 91093

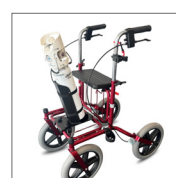

Syrgashållare

Ger säker förvaring av större syrgastub.

Art. nr: 10609

Tekniska specifikationer

Artikelnamn	Art. nr.	Min. höjd	Max. höjd	Sitthöjd	Bredd	Bredd mellan handtagen	Hjulstorlek	Vikt	Max brukarvikt
Rebel 57	22140	75 cm	93 cm	62 cm	57 cm	37 cm	20 x 4 cm	9.5 kg	140 kg
Rebel 62	22240	75 cm	93 cm	62 cm	62 cm	42 cm	20 x 4 cm	9.6 kg	140 kg
Rebel 67	22340	75 cm	93 cm	62 cm	67 cm	47 cm	20 x 4 cm	9.7 kg	140 kg
Rebel 72	22440	75 cm	93 cm	62 cm	72 cm	52 cm	20 x 4 cm	9.9 kg	140 kg
Rebel låg 57	22141	68 cm	86 cm	54 cm	57 cm	37 cm	20 x 4 cm	9.2 kg	140 kg
Rebel låg 62	22241	68 cm	86 cm	54 cm	62 cm	42 cm	20 x 4 cm	9.4 kg	140 kg
Rebel låg 67	22341	68 cm	86 cm	54 cm	67 cm	47 cm	20 x 4 cm	9.5 kg	140 kg
Rebel låg 72	22441	68 cm	86 cm	54 cm	72 cm	52 cm	20 x 4 cm	9.7 kg	140 kg
Rebel förstärkt 62	71221	75 cm	93 cm	62 cm	62 cm	42 cm	20 x 4 cm	11.5 kg	250 kg
Rebel förstärkt 67	71321	75 cm	93 cm	62 cm	67 cm	47 cm	20 x 4 cm	11.6 kg	250 kg
Rebel förstärkt 72	71421	75 cm	93 cm	62 cm	72 cm	52 cm	20 x 4 cm	11.8 kg	250 kg
Rebel hög 57 cm	22144	80 cm	98 cm	62 cm	57 cm	37 cm	20 x 4 cm	9.5 kg	140 kg
Rebel Hög 62 cm	22244	80 cm	98 cm	62 cm	62 cm	42 cm	20 x 4 cm	9.6 kg	140 kg
Rebel Hög 67 cm	22344	82 cm	100 cm	62 cm	67 cm	47 cm	20 x 4 cm	9.7 kg	140 kg
Rebel Hög 72 cm	22444	82 cm	100 cm	62 cm	72 cm	52 cm	20 x 4 cm	9.9 kg	140 kg