

Allround



Rebel Gåbord



Extra stöd  
Handbroms  
Kvalité



Utomhus



Carl-Oskar Gåbord

Med ett gåbord får brukaren mer stöd än med en vanlig rollator. Underarmarna vilar bekvämt på en fast och bred dyna. Samtliga Human Cares gåbord har fasta bakgafflar och svängbara, kullagrade framgafflar samt brukarmanövrerad handbroms till skillnad från de gåbord som har fyra svängande hjul och vårdarmanövrerad hjulbroms.

Smala utrymmen



Staffan Gåbord

#### Rebel Gåbord

Rebel Gåbord är ett stabilt gånghjälpmedel för inom- och utomhusbruk. Rejåla hjul och kullagrade framgafflar ger förutsättningar för trygga och säkra förflyttningar. Gåbordet kan förses med tillbehör såsom korg, enhandsbroms eller släpbroms. Höjd- och handtagsinställningar görs utan verktyg. Med gåbordsdynan demonterad är det enkelt att fälla ihop gåbordet vid transport i personbil.

manövrerad broms. Hydraulisk höj- och sänkingsfunktion via gaskolv medger snabb och enkel höjdanpassning till olika brukare varför gåbord Svea fungerar väl såväl i privathem som i särskilda boenden eller sjukhus. Gåbord med fast bakgaffel innebär god riktinstabilitet varför det lämpar sig mycket väl vid gångträning. Svea kan förses med stödhjul framåt som tillbehör. Svea finns i två bredder och två höjder.

Gångträning



Svea Gåbord

#### Carl-Oskar Gåbord

Carl-Oskar Gåbord har samma funktioner som Rebel, ovan, men har större hjul och en högre produktvikt för att ge ett ännu säkrare stöd vid användning utomhus. Både Rebel Gåbord och Carl Oskar Gåbord finns i vardera två bredder och två höjder.

#### Staffan Gåbord


Staffan Gåbord är ett nätt gåbord för inomhusbruk som med sina mindre mått lämpar sig väl där utrymmet är trångt. Separat inställbara handtag ger möjlighet för personlig anpassning medan gåbordsdynan ger ett bekvämt stöd för underarmarna. Chassits design medger ett gott gångutrymme. Staffan Gåbord kan förses med tillbehören korg eller enhandsbroms. Inställningar och även hopfällning görs helt utan verktyg. Staffan Gåbord finns i två höjder.

#### Svea Gåbord

Svea Gåbord är ett synnerligen stabilt gåbord med fasta bakhjulsgafflar och brukar-




## Tillbehör och funktioner

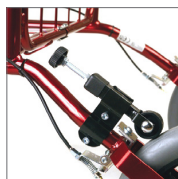

### Släpbroms

Tillbehör som gör rollatorn mindre lätttrullad.  
Art. nr. 10620  
Säljs i par. Kan ej användas till Staffan och Svea Gåbord.

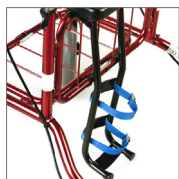

### Syrgashållare

Art. nr. Carl-Oskar Gåbord, Rebel GB 10615  
Art. nr. Staffan GB: 40605. Kan ej användas till Svea Gåbord.



### Reflex-kit

Hjälper dig och din rollator att synas i mörkret.  
Art. nr. 91090




### Käpphållare

Underlättar medtagandet av käppen.  
Art. nr. 10603 (Staffan Gåbord 40603). Kan ej användas till Svea Gåbord.



### Korg med handtag

Underlättar vid inköp och utflykter. Art. nr. Staffan Gåbord: 40603.  
Övriga modeller: 10601.  
Maxvikt: 10 kg

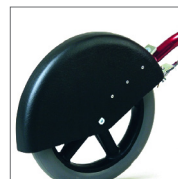


### Stänkskydd

Skyddar ben och klädsel.  
Art. nr. 10608



### Enhandsbroms

Möjliggör att styra bromsarna med en hand. Art. nr. Staffan Gåbord, hög: 10654. Övriga modeller: 10653.

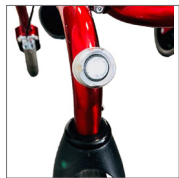

### Lamp-kit

Hjälper dig och din rollator att synas i mörkret.  
Art. nr. 91091



### Bricka

Underlättar förflyttning av saker. Art. nr. 10601. Kan ej användas till Staffan eller Svea Gåbord.



### Steghjälp

Underlättar förflyttningen över hinder. Art. nr. 10612.  
Kan ej användas till Staffan Gåbord och Svea Gåbord.



### Lås

För låsning av rollator.  
Art. nr. 91092

## Tekniska specifikationer

Artikelnamn	Art. nr.	Min. höjd	Max. höjd	Bredd	Hjulstorlek	Vikt	Max brukarvikt
Carl-Oskar Gåbord, Låg 67 cm	13315	95 cm	113 cm	67 cm	30 x 5 cm	14.5 kg	125 kg
Carl-Oskar Gåbord, Normal 67cm	13325	107 cm	126 cm	67 cm	30 x 5 cm	14.7 kg	125 kg
Carl-Oskar Gåbord, Låg 72 cm	13415	95 cm	113 cm	72 cm	30 x 5 cm	14,6 kg	125 kg
Carl-Oskar Gåbord, Normal 72cm	13425	107 cm	126 cm	72 cm	30 x 5 cm	14.8 kg	125 kg
Rebel Gåbord, Låg 67cm	23311	86 cm	104 cm	67 cm	20 x 4 cm	12.8 kg	125 kg
Rebel Gåbord, Normal 67cm	23321	104 cm	122 cm	67 cm	20 x 4 cm	13.0 kg	125 kg
Rebel Gåbord, Låg 72 cm	23411	86 cm	104 cm	72 cm	20 x 4 cm	12.9 kg	125 kg
Rebel Gåbord, Normal 72 cm	23411	104 cm	122 cm	72 cm	20 x 4 cm	13.1 kg	125 kg
Staffan Gåbord, Låg 62cm	23421	86 cm	108 cm	62 cm	20 x 4 cm	11.7 kg	90 kg
Staffan Gåbord, Hög 62cm	43221	107 cm	128 cm	62 cm	20 x 4 cm	11.9 kg	125 kg
Svea Gåbord, Låg 59cm	53211	82 cm	107 cm	59 cm	20 x 4 cm	14.9 kg	150 kg
Svea Gåbord, Norma 59cm	53221	101 cm	126 cm	59 cm	20 x 4 cm	15.1 kg	150 kg
Svea Gåbord, Låg 68cm	53411	82 cm	107 cm	68 cm	20 x 4 cm	15.1 kg	150 kg
Svea Gåbord, Normal 68cm	53421	101 cm	126 cm	68 cm	20 x 4 cm	15.3 kg	150 kg