

Comfort Sling Soft & Comfort Sling High Soft



Sittsele

Odelade ben

Hög komfort



Comfort Sling Soft High
Art. Nr: 25069



Comfort Sling Soft
Art. Nr: 25064

Våra Comfort Sling Soft & Comfort Sling High Soft är designade för att erbjuda klienten hög komfort och en känsla av trygghet. De odelade benen distribuerar klientens vikt jämnt för att sänka trycket, vilket gör denna sele till ett ultimatum val för klienter med smärta. Denna sele finns tillgänglig i två modeller, en med extra huvudstöd.

Unikt Material

Våra Comfort Slings är gjorda av Soft Air Mesh, ett material som är exklusivt för Human Care. Detta mjuka material främjar färre ompositioneringar, och gör den optimal för känsliga brukare med smärta. Dessutom främjar inte materialet hudnedbrytning och kan därför lämnas kvar under patienten, under korta perioder.

Funktionell Design

Human Cares Comfort Slings har inga förstärkande handtag eller vaddering, och inkluderar odelade ben som jämt distribuerar brukarens vikt. Med jämn distribuering reduceras trycket och brukaren upplever ökad komfort. Denna sele finns tillgänglig två modeller, en med extra huvudstöd. Båda selar är definierade som "sit-i" selar och kan appliceras när brukaren ligger ner.

Enkel passform

Våra Comfort Slings är gjorda av de högsta kvalitetsstandarderna. De har förstärkta remar och nylonsömmar runt selen för att återigen förstärka selen till att vara så anpassad som möjligt för aktivt användande. Varje seles etikett har en färgkod, för att försäkra enkelt och snabbt val av korrekt sele till varje enskild brukare.



Tillbehör



Förlängningsband

Med hjälp av förlängningsband kan selens position justeras. Kan också användas för att hålla bendelarna samman. Art nr: 21180.*



Benpolstring och benstöd

Utmärkt för användare med känslig hud eller som har smärta. Benpolstring, art nr. 21146-S, M och L. Förstyvade benstöd, art. nr. 25102



Bygelpolstring

Det polstrade fodralet skyddar användaren från sammanstötningar med lyftbygeln. Ska inte användas våta miljöer. Art. nr. 50866



Lyftbyglar för 4-punktsupphängning

Art. nr. 55619 Lyftbygel till 4-punktsupphängning i portabel lyft. Art. nr. 70800 4-punktsbygel till stationär lyft.

Lyftsituation



Till och från sängen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.




Till och från rullstolen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från rullstolen.



Använd från golvet


Fungerande vid förflyttning från golvet.

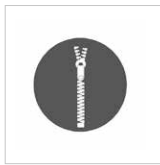

Använd för påklädning/avklädning


Användbar för på och avklädning.

Skötsel och anvisningar

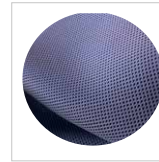

Soft Air Mesh

Lätt, svalt och ventilerande material. fungerar väl med kunder med känslig hud.

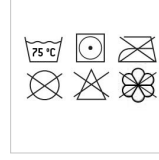

Skötsel

Skötselinstruktioner lokerade på etikett. Använd som sjukhus gradsvätt.

Tekniska specifikationer

Artikelnummer		Storlek	Färg	Art nr: 25064			Art nr: 25069			Diagram
				A	B	C	A	B	C	
Comfort Sling Soft	Comfort Sling High Soft									
25064-JM	25069-JM	Junior Medium	JM	76cm / 30"	73cm / 28.7"	90cm / 35.4"	76cm / 30"	73cm / 28.7"	111cm / 43.7"	
25064-S	25069-S	Small	S	76cm / 30"	80cm / 31.5"	100cm / 39.3"	76cm / 30"	80cm / 31.5"	122cm / 48"	
25064-M	25069-M	Medium	M	86cm / 33.9"	90cm / 35.4"	110cm / 43.3"	86cm / 33.9"	90cm / 35.4"	134cm / 52.8"	
25064-L	25069-L	Large	L	96cm / 37.8"	105cm / 41.3"	116cm / 45.7"	96cm / 37.8"	105cm / 41.3"	139cm / 54.7"	
25064-XL	25069-XL	Extra Large	XL	106cm / 41.7"	118cm / 46.5"	120cm / 47.2"	106cm / 41.7"	118cm / 46.5"	145cm / 57.1"	
Maximal användarvikt		300kg / 660 lb								

* Tillgängliga i följande längder: 10cm/3.9" [21180-10], 15cm/5.9" [21180-15], 20cm/7.8" [21180-20], 25cm/9.8" [21180-25], 35cm/13.7" [21180-35]



We improve freedom of movement and quality of care for people.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com