



Nackstöd Barn/Ungdomsstorlekar Axelvaddar



Activity Sling är designad för att hjälpa barn eller unga tonåringar med gångträning eller rehabiliteringsövningar. Activity Sling är gjord av ett polyesternät och har en förlängd baksida för att stödja nacken och huvudet under rörelse.

Bekväm

Activity Sling har elastiska remmar på sidorna för maximal flexibilitet under rörelse. Med extra huvudstöd och bekväm axelvadd möjliggör den mer bekväm och säker rörelse. Activity Sling är designad för 2-punktsupphängning och kan endast användas med taklyft.

Mångsidig design

Activity Sling är designad för att ge stöd för både över- och underkroppen, men användaren måste ha viss kroppskontroll för att kunna röra sig, balansera och gå medan han tränar gång eller rehabilitering. Det mjuka, andningsbara polyesternettyget har viss elasticitet som gör att det kan

röra sig med patienten och designen i "byxa"-stil säkerställer att selen inte glider upp. Aktivitetssele appliceras i ryggläge.

Easy Care och Easy Fit

Våra selar är tillverkade enligt högsta kvalitetsstandard.

De har förstärkta remmar och höghållfast nylonband runt selen för att göra dem starka nog att motstå även den mest aktiva användningen. Varje lyftseleetikett är färgkodad för att säkerställa ett snabbt och enkelt val av rätt lyftsele och remmarna är färgkodade för enkel bestämning av önskad placering.

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone:- +46 8 665 35 00
Fax:- +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com

Tillbehör



Förlängningsband

Används för att förlänga lyftbanden och alternera lyftläge samt att hålla ihop bendelarna. Flera längder. Art. nr. 21180-*



Axelvaddar

För ökad komfort, kommer med selen. reservdelsnummer: 25101



Bygelpolstring

Det polstrade fodralet skyddar användaren från sammanstötningar med lyftbygel. Ska inte användas i våta miljöer. Art. nr. 50866

Lyftsituationer



Till och från sängen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.



Till och från rullstolen


Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från rullstolen.



Användbar för gångträning


Användbar för gångträning och rehabiliteringsövningar.

Skötsel och vård

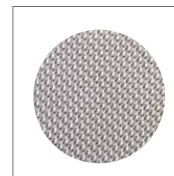

Polyester Nät

Hållbar, låg friktion, lätt att rengöra, applicera och ta bort

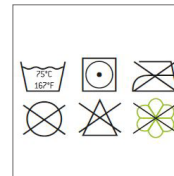


Skötsel

Skötselinstruktioner finns på selens etikett. Använd en tvättpåse godkänd för sjukhustvätt.



Tekniska specifikationer

Artikel nummer	Storlek	Färg	Viktspann	A	B	C
Polyester Net			Rekomenderad	(Öppen sele)		
25100-JS	Junior Small	JS	15kg -20kg/ 33.1 lb - 44.1 lb	37cm / 14.6"	27cm / 10.6"	69cm / 27.1"
25100-JM	Junior Medium	JM	20kg -35kg/ 44.1 lb - 77.2 lb	39cm / 15.3"	30cm / 11.8"	75cm / 29.5"
25100-JL	Junior Large	JL	35kg - 50kg/ 77.2 lb - 110.2 lb	41cm / 16.1"	33cm / 13.0"	81cm / 31.9"
25100-S	Small (Tonåring)	S	40kg - 60kg/ 88.2 lb - 132.3 lb	43cm / 16.9"	39cm / 15.3"	87cm / 34.3"
Max användarvikt		100kg/220lb				

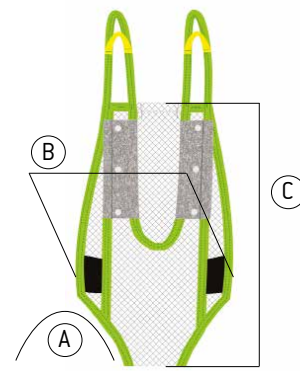

* tillgängliga i följande storlekar: 10cm/3.9" (21180-10), 15cm/5.9" (21180-15), 20cm/7.8" (21180-20), 25cm/9.8" (21180-25), 35cm/13.7" (21180-35)