



Auto Contour
Handset Lockout
Homecare/LTC



Vår Floorline i är en fantastisk lösning för både sjukhus och långtidsboenden. Dess funktioner inkluderar standard säng position, en automatisk knapp för hjärtläge (hjärtstol) och en variation av valbara tillbehör vilket ger möjlighet till utmärkt vård.

Kliniska fördelar

Floorline i, ultralåg säng, kan sänkas till ett avstånd av 10 cm från golvet och en arbetshöjd på upp till 80 cm. Detta gör sängen till ett idealiskt alternativ för anläggningar med högriskfallspatienter. Eftersom Floorline i bara är 10 cm från golvet rullar patienten ut ur sängen istället för att falla och undviker de farliga och kostsamma konsekvenserna av ett fall. Dessutom minskar behovet av extra övervakning av dessa riskpatienter kraftigt, vilket ökar totala besparingar för själva anläggningen.

Optimala funktioner

Floorline i har standardpositioner som Trendelenburg, omvänd Trendelenburg och hjärtpositionering. Med ett komplett

sortiment av tillbehör, en lättanvänd telefon som har en låsbar nyckel och hållbar LINAK-elektronik, främjar Floorline i både patientens och vårdgivarens säkerhet.

Kvalitet

Våra produkter är designade och tillverkade för att uppfylla alla krav i relevanta standarder. Vid varje steg i utvecklingsprocessen får varje enskild produkt stor uppmärksamhet inom design, utveckling och tillverkning. Detta innebär att användaren känner sig trygg med produkten, och vårdgivaren känner sig trygg med klientens säkerhet.



Walking Aids



Healthcare Beds



Lifting Solutions




Hygiene



Convertible chairs

Accessories

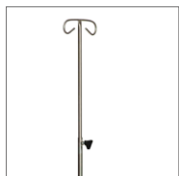

Dropställning

Justerbar höjd. Kan monteras på båda ändarna av sängen. Max SWL 7kg. Art.nr. IVP.



Stöd- och vändhandtag

Designad för att hjälpa patienter på ett säkert sätt ur sängen. Ergonomisk design. Art. nr. 90702.



Förlängningskit

Förlänger sängen med 17,5cm, för längre patienter. Art. nr. 90709.




Handset

Fem funktioner - inkluderas med sängen. Art nr: 75746
Handsethållare Art nr: LC2250



Lyftbåge

För att hjälpa patienten att komma upp och ändra ställning. Maximum SWL 75kg. Art. nr. SHP600.

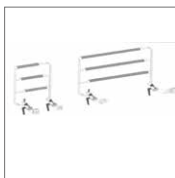

Sänggrindar

1/4 strl, art. nr: 72794
1/2 strl, art. nr: 72795
3/4 strl, art. nr: 72797



Bumper

Bumpern skyddar huvudänden av sängen, monteras på det lägre staget, mellan hjulen. Art nr. 90705.



Syrgashållare

Fäste för placering av syrgasflaska i C-storlek. Art.nr. 90707.

Features



Körhandtag

Kan monteras på fotändan av sängen för att hjälpa vårdare med enkel manövrering. Art. nr: 90708 (inkluderad).



Standardpositioner

Inkluderar autokontur, ryggstöd, knäböj, Trendelenburg, omvänd Trendelenburg, kardiak.



Riktningsslås

Ett hjul med riktningsslås och tre med vanliga lås, ger enkel manövrerbarhet.



Tekniska specifikationer

Floorline i			
Art. nr.	90300 (EU), 90301 (AU), 90302 (NA), 90303 (UK)		
Plattformshöjd (Min-Max)	10cm - 80cm / 4" - 31.5"	Övergripande sänglängd (standard till längd med förlängningskit)	232.5cm - 250cm / 91.5" - 98.5"
Sängmått (L x B)	200cm x 90cm / 78.7" x 35.5"	Sängmått med förlängningskit (L x B)	217.5cm x 90.5cm / 85.5" x 35.5"
Sovyta (L x B)	200cm x 90cm / 78.7" x 35.5"	Sovyta med förlängningskit (L x B)	217.5cm x 90cm / 85.5" x 35.5"
Elektrisk Spänning	Max. 24V DC	IP-klassning	IPX4
Matningsspänning	120V, 60Hz (90404 to 90607), else 230V, 50Hz	Produktvikt	150kg / 330lb
Panelvinklar Madrassbas	Ryggstöd 70°, Lår 45°, Knä 110°, Vad 25°, Trendelenburg/Omvänd Trendelenburg 18°	Säker arbetslast (SWL)	250kg / 550lb
Driftsperiod	2 minuters drift, 18 minuters vila	Max användarvikt	185kg / 407lb