



Floorline i-Plus är en komplett lösning för vårdhantering. Med sitt stora utbud av funktioner såsom Trendelenburg (chockläge), hjärtläge och elektronisk CPR-funktion erbjuder Floorline i-Plus bästa möjliga vård. Med sin digitala styrenhet är den också framtidssäkrad för att kunna lägga till ännu fler tillbehör.

#### Ultralåga sängar reducerar fallskador

Floorline i-Plus är den perfekta lösningen för att förhindra fallskador. Dess lägsta höjd från golvet är bara 10 cm. Samtidigt är inga kompromisser gjorda för utmärkt ergonomisk arbets höjd på 80 cm. Floorline i-Plus har i lägsta läge ett avstånd från golvet om 10 cm. Varför spelar några centimeter roll? Om avståndet bara hade varit 5 cm högre (15 cm), hade kraften i ett fall från sängen ökat med 50%. Skillnaden kan vara ett enkelt blåmärke jämfört med en bruten höftled. En bruten höftled kan innebära utökad sjukhusvistelse eller till och med att patienten avlider. Förutom de fysiska effekterna ger fallskador också psykologiska effekter som lägre tillit till den egna balansen och en ökad rädsla för att


falla igen. Samhällets kostnader för fallolyckor bland äldre uppskattas till ungefär 14 miljarder kronor per år i Sverige. Varje förhindrad fallolycka har en enorm positiv betydelse för både individ och samhälle.

#### Säkerhet, kvalitet och användbarhet

För oss är säkerhet, kvalitet och användbarhet av största vikt. Vi strävar ständigt efter att säkerställa och förbättra högsta kvalitet hos alla våra produkter. I varje detalj, i varje aspekt, håller våra produkter vad de lovar.



## Tillbehör och funktioner

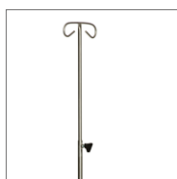

### Droppställning

Justerbar höjd. Kan monteras på båda ändarna av sängen. Max SWL 7kg. Art.nr. IVP.



### Lyftbåge

För att hjälpa patienten att komma upp och ändra ställning. Maximum SWL 75kg. Art. nr. SHP600.



### Körhandtag

Kan monteras på fotändan av sängen för att hjälpa vårdare med enkel manövrering. Art. nr. 90708 (inkluderad).



### Stöd- och vändhandtag

Designad för att hjälpa patienter på ett säkert sätt ur sängen. Ergonomisk design. Art. nr. 90702.



### Sänggrindar

1/4 strl, art. nr: 72794  
1/2 strl, art. nr: 72795  
3/4 strl, art. nr: 72797



### Standardpositioner

Inkluderar autokontur, ryggstöd, knäböj, Trendelenburg, omvänd Trendelenburg, kardiak.



### Förlängningskit

Förlänger sängen med 17,5cm, för längre patienter. Art. nr. 90709.



### Bumper

Bumpern skyddar huvudänden av sängen, monteras på det lägre staget, mellan hjulen. Art. nr. 90705.



### Riktningsslås

Ett hjul med riktningsslås och tre med vanliga lås, ger enkel manövrerbarhet.



### Syrghållare

Fäste för placering av syrgasflaska i C-storlek. Art.nr. 90707.

## Tekniska specifikationer – Floorline i-Plus

Floorline i-Plus			
Art. nr Standard	90500 (EU)	Plattformshöjd (Min-Max)	10cm - 80cm
Sovyta (L x B)	200cm x 90cm	Sängmått (L x B)	217,5cm x 90.5cm
Elektrisk spänning	Max. 24V DC	IP-klassning	IPX4
Matningsspänning	230V, 50Hz	Produktvikt	150kg
Max användarvikt	185kg	Säker arbetslast (SWL)	250kg
Driftsperiod	2 minuters drift, 18 minuters vila		

