

Selar utprovningsprotokoll

Brukarinformation:

Namn:

Rum:

Lokal:

Lyft:

Lyftbygel:

Selmodell:

Namn/Artikelnummer:

Material:

Storlek:



Förlängningsband överdel:

21180-10 (10cm/3.9")
21180-15 (15cm/5.9")
21180-20 (20cm/7.8")
21180-25 (25cm/9.8")
21180-35 (35cm/13.7")

Förlängningsband underdel:


21180-10 (10cm/3.9")
21180-15 (15cm/5.9")
21180-20 (20cm/7.8")
21180-25 (25cm/9.8")
21180-35 (35cm/13.7")




Armplacering:




Benplacering:

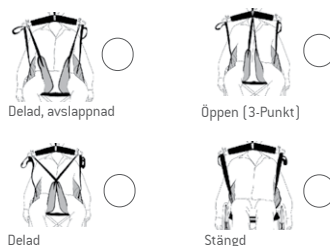

Upphängning:

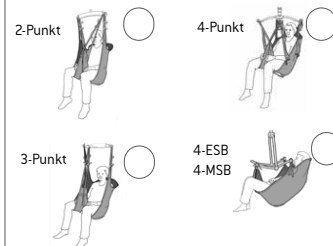

Tillbehör:

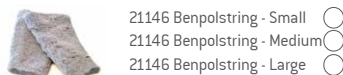

Använd ej i våtutrymmen.

Kommentarer:

Utprovningsprotokoll utfört av:

Position/Titel:

Datum:

Storleksguide:

					
Användarvikt kg	Brukarlängd cm	Brukar ryggghöjd* cm	Brukar höftbredd* cm	Rekommenderad storlek*	Färg
15-20	110-130	55-65	23-30	Junior Small (JS)	
20-35	120-150	60-75	29-38	Junior Medium (JM)	
30-60	140-170	70-85	36-42	Small (S)	
55-90	160-190	80-95	41-47	Medium (M)	
85-120	180-206	90-103	46-55	Large (L)	
110-150	180-210	98-112	54-67	Extra Large (XL)	
140-200	180-210	103-117	60-74	Extra Extra Large (XXL)	
190-300	180-210	108-125	63-78	Extra Extra Extra Large (XXXL)	

* För att mäta klientens ryggghöjd, mät från klientens coccyx till toppen av huvudet.

* För att mäta klientens höftbredd, låt klienten sitta ner och mäta i en rak linje (inte omkretsen).

* Dessa storlekar är enbart rekommendationer. En korrekt utprovning skall alltid utföras av kliniskt kunnig personal med hjälp av lyftselens användammanual. Observera att vissa lyftselar inte finns i alla storlekar. Du hittar ritningar på varje lyftsele i bruksanvisningen, levererad med produkten och tillgänglig på våra webbplatser.

Utprovningsprotokoll utfört av:

Namn:

Datum:

Position/Titel:



Viktigt! Detta utprovningsprotokoll ersätter inte användarmanualen. Läs alla instruktioner innan användning.