
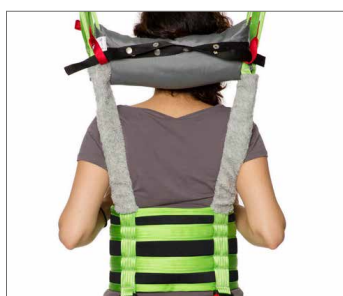


Multi Sling

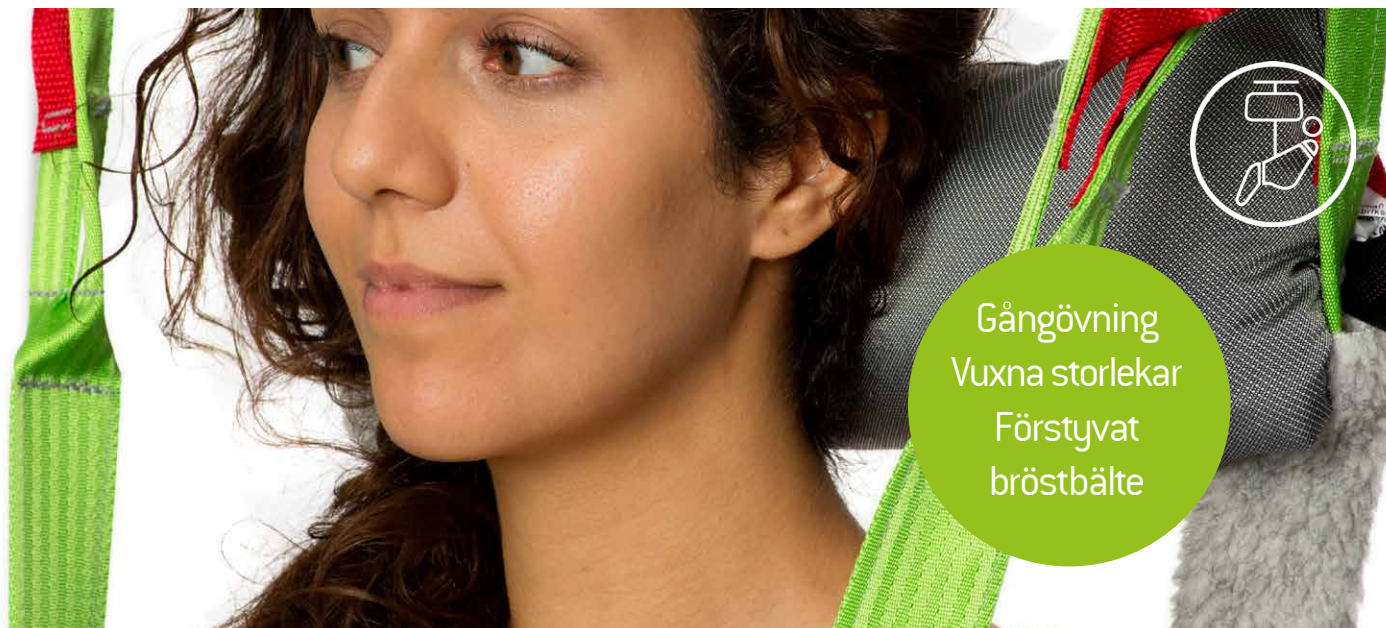

Multi Sling är den perfekta selen för gångträning och rehabiliteringsövningar. Den är lämplig för patienter med viss grad av kroppsstabilitet och kan användas för av- och på- och toalettbesök. Den är gjord av slitstark polyester och kommer med ett komplett sortiment av tillbehör för extra stöd och mångsidighet.

Multi användning

Multi Sling är designad för att fungera som stöd vid stående, gå och balansövningar, men den kan även användas för av- och påklädning samt besök på toaletten. Den består av olika delar - ett bröstbälte, grendelar och axelpolstring. Multi Sling kan användas med antingen 2-punkts, 3-punkts eller 4-punktsupphängning och användaren av denna sele måste delvis använda sina ben.

Komplett utbud av tillbehör

Multi Sling erbjuder ett komplett utbud av valfria tillbehör som ökar dess funktionalitet. Brösthälte kan användas som ett stöd under gång- och balansövningar och, i kombination med höftbälte, tillåter det patienter med

funktionsnedsättningar (som stroke) att använda produkten. För extra komfort kan nackkudden användas och för ökad säkerhet, ljumskestödet eller ett midjebälte.

Easy Care och Easy Fit

Våra selar är tillverkade enligt högsta kvalitetsstandard. De har förstärkta öglor och höghållfast nylonband runt selen för att göra dem starka nog att motstå även den mest aktiva användningen. Varje lyftseleetikett är färgkodad för att säkerställa ett snabbt och enkelt val av rätt lyftsele och öglorna är färgkodade för enkel bestämning av önskad placering.

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone:- +46 8 665 35 00
Fax:- +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com

Tillbehör



Höftbälte

Används som ett komplement till Multisele. Bältet hjälper patienten vid uppresning och ger ett jämnare tryck på höfterna. Art. nr: 25107



Nackkudde

En kudde för extra stöd och komfort som kan användas som ett komplement till Multiselen eller axelhöga lyftselar. Art.nr: 25150



Midjebälte

Stång med kardborre-band (Art. nr: 25145-** eller spänne. Finns i junior- och vuxenstorlek.



Bygelpolstring

Det polstrade fodralet skyddar användaren från sammanstötningar med lyftbygeln. Ska inte användas i våta miljöer. Art. nr: 50866

Lyftsituationer



Till och från sängen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.




Till och från rullstolen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från rullstolen.



Användbar för gångträning


Användbar för gångträning och rehabiliteringsövningar.

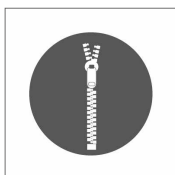

Använd för påklädning/avklädning


Användbar för på och avklädning.

Skötsel och vård

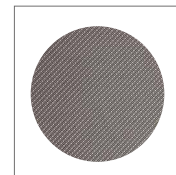

Polyester

Mjukt, tunt material som andas och torkar snabbt. Idealisk för bad eller duschning.

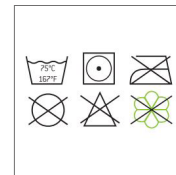


Skötsel

Skötselinstruktioner finns på selens etikett. Använd en tvättpåse godkänd för sjukhustvätt.



Tekniska specifikationer

Artikel nummer	Storlek	Färg	Viktspann	Midjemått	A	B	C
Polyester			[Rekommenderad]	[Min-Max]			
25105-S	Small	S	50kg - 80kg	60cm - 91cm	86cm	36cm	20cm
25105-M	Medium	M	70kg - 100kg	94cm - 110cm	104cm	38cm	20cm
25105-L	Large	L	90kg - 140kg	104cm - 129cm	122cm	40cm	20cm
25105-XL	Extra Large	XL	130kg - 200kg	129cm - 145cm	140cm	42cm	20cm
Max användarvikt	200 kg/ 440 lbs						

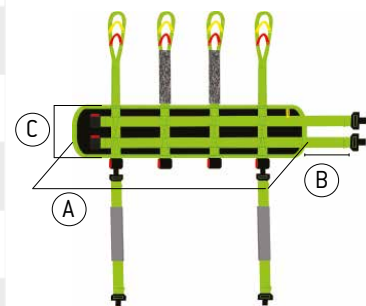

* Tillgängliga i följande storlekar: 10cm/3.9" [21180-10], 15cm/5.9" [21180-15], 20cm/7.8" [21180-20], 25cm/9.8" [21180-25], 35cm/13.7" [21180-35]

** Tillgängliga storlekar: 60cm/23.6" [25145-60], 70cm/27.6" [25145-70], 80cm/31.5" [25145-80], 90cm/35.4" [25145-90], 110cm/43.3" [25145-110], 120cm/47.3" [25145-120]

*** Tillgängliga storlekar: 60cm/23.6" [25146-60], 70cm/27.6" [25146-70], 80cm/31.5" [25146-80], 90cm/35.4" [25146-90], 100cm/39.4" [25146-100], 110cm/43.3" [25146-110], 120cm/47.3" [25146-120]