

Guess 402

Ergonomisk
Anpassningsbar
Trygg



Den bekväma, kostnadseffektiva Guess 402 lämpar sig för den dagliga patientvården, samt för lättare intensivvård och för att främja ett snabbt tillfrisknande. Dess moderna styrmöjligheter är särskilt attraktiva. Guess 402 delade grindar är lätta att använda och har utmärkta hygieniska och funktionella egenskaper.

Sjukhussängen som möter alla krav

Sjukhussängar förväntas uppfylla ett extremt brett spektrum av krav. Uppgifterna de ställs inför på de olika sjukhusenheterna är ofta omfattande vilket medför att flera olika modeller måste köpas in.

Vi vet att marknaden har ett behov av sängar med många olika funktioner anpassat till enheten där sängen skall användas. Sett ur ett användar-, miljö- och kostnadsperspektiv skulle det vara mer effektivt att använda en sängmodell som uppfyller de krav som olika vårdenheter har för sina verksamheter. Detta är precis det tillvägagångssätt som GUESS 402 från KENMAK följer.

Dess smarta modulsystem gör GUESS 402 i princip lika hemma på alla sjukhusenheter. Den är utrustad med fyra motorer, och en mängd olika styralternativ, säkerhetssystem och tillbehör gör det möjligt att skapa en praktisk och attraktiv mångsidig sjukhussäng som tillgodoser individuella krav samtidigt som den är kostnadseffektiv.

Guess 402 underlättar mycket för personalens arbete genom att den är ergonomiskt utformad och enkel att använda. Designen av sängen underlättar också rengöring vilket är viktigt sett ur de hygienkrav som ställs inom verksamheterna.

Kenmak
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör av
Kenmak produkter i Sverige



Walking Aids



Healthcare Beds



Lifting Solutions




Hygiene



Convertible chairs

Tillbehör

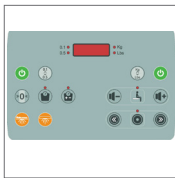

Integrerad våg

Censorer sitter i varje hörn av sängbotten och mäter vikt automatiskt, 0-400kg.
Art nr: WS402



Lyftbåge: Båge med justerbart handtag i höjddled. Art nr: LP402

Droppställning: Teleskopiskt höjjusterbart. Art nr: IV402
IVA-skene tillgänglig.



Monitorbord

Stabilt bord som uppfällbart. Placeras på huvud eller fotgavel.
Art nr: MS402



Integrerad vårdarkontrollpanel

Till denna säng erbjuder vi även integrerad vårdarkontroll i sänggrinden.
Art nr: ISDP402

Funktioner



5:e hjul

Underlättar manövrering av sängen i trånga utrymmen.
Art nr: 5W402



Vårdarkontroll

Batteriindikator, låsfunktioner för knappar. Vårdpersonal har en-knappfunktioner, knapp för HLR och Chockläge.



Handkontroll

Kontroll för både patient och vårdpersonal.



Trendelenburg


16 grader Trendelenburg / omvänd Trendelenburg

Funktioner



Huvud och fotgavel

Avlägsnas enkelt utan verktyg. Tillverkade i ABS plast.

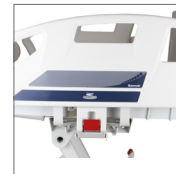

Grind

Grindar med stödhandtag i ABS plast. Sängen är utrustad med två grindar på varje sida.
Grindförhöjning finns tillgänglig.



Sängförlängning

Integrerad förlängning av sängbotten, 20 cm.
Art nr: BE402



Centrallåsning

Antistatiska, 150 mm kapslade dubbelhjul med centrallåsning. Fler storlekar på hjul finns, se vår hemsida.

Tekniska specifikationer

Guess 402			
Art. nr:	Guess 402-SE	Plattformshöjd (Min-Max)	38 cm - 80 cm (utan madrass)
Sovyta / Madrassyta (L x B)	200 cm x 85 cm	Sängmått / Yttermått (L x B)	220 cm x 104 cm
Elektrisk spänning	220 / 240 Volt	IP-klassning	IPX6
Matningsspänning	50/60Hz	Produktvikt	120 kg
Max användarvikt	200 kg	Säker arbetslast (SWL)	230 kg
Driftsperiod	2 minuter på / 18 minuter av		

