

För barn & ungdomar

Anpassningsbar med flera funktioner



Den bekväma och kostnadseffektiva sängen Bambino, utrustad med 4 motorer, lämpar sig mycket väl för slutenvården, och för att främja ett snabbt tillfrisknande för individer i åldersintervallet 3 till 18 år. Dess moderna styrmöjligheter och flertalet funktioner gör detta till en attraktiv säng för vården då den kan användas till ett flertal patientgrupper.

Sjukhussängen som möter kraven

Sjukhussängar för barn och ungdomar måste idag möta kraven av flertalet patienter och vårdavdelningar, vilket kan leda till att ett flertal sängar måste köpas in. I sängen Bambino har vi samlat en rad funktioner som gör sängen lämplig för ett stort antal behov. På så sätt kan man hålla investeringskostnaderna för sängar på en låg nivå.

Bambino är en flexibel och säker säng som lätt kan anpassas. Den är bland annat utrustad med ett flertal kontrollalternativ, ett utbyggt säkerhetssystem, dubbelhjul med centrallåsning och genomtänkta säkerhetsgrindar. Det finns dessutom

ett antal tillbehör för ytterligare anpassning.

Sängen erbjuder ett flertal positioner som regleras elektriskt såsom höjd, ryggstöd, benstöd, trendelenburg, och omvänd trendelenburg. Sängen har även elektrisk och manuell HLR funktion. Vidare har den en elektrisk sängförlängning med upp till 30 cm.

Bambino stödjer vårdpersonalens arbete genom att den är ergonomiskt utformad och enkel att använda. Designen av sängen underlättar också rengöring vilket är viktigt sett ur de hygienkrav som ställs inom verksamheterna.

Kenmak
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör av
Kenmak produkter i Sverige



Walking Aids



Healthcare Beds



Lifting Solutions



Hygiene



Convertible chairs

Funktioner



Huvud och fotgavel

Transparanta gavlar med barnmotiv, tillverkade i ABS-plast. Avlägsnas enkelt utan verktyg.



Sänggrindar

Justerbara sänggrindar i tre höjdlägen.



Sängförlängning

Integrerad elektrisk förlängning av sängbotten, 30 cm.



Väggfrånållare

Sängen är utrustad med 4 stycken väggfrånållare i vardera hörn, för att skydda sängen.



Centrallåsning

Antistatiska, 150 mm kapslade dubbelhjul med centrallåsning. Fler storlekar på hjul finns tillgängligt.



Vårdarkontroll

Batteriindikator, låsfunktioner för knappar. Vårdpersonal har en-knappfunktioner, knapp för HLR och Chockläge.




Droppställning

Teleskopiskt höjjusterbar.



Lyftbåge: Båge med justerbart handtag i höjdlägen.

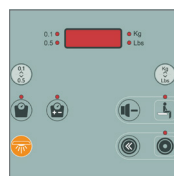

Integrerad våg

Censorer placeras i varje hörn av sängbotten och mäter vikt automatiskt, 0-400kg.



Madrass

Madrass, med svetsade sömmar, med avspritningsbart överdrag som kan tvättas i 60 grader. Längd 160 cm, bredd 85 cm, höjd 10 cm. Förlängningsdel som ger ytterligare 30 cm i längd finns tillgängligt. Uppfyller brandkrav BS 7175.

Namn

Art.nr

Madrass

K090-P

Madrassöverdrag

K090-P-C


Förlängningsdel

K090-P-E

Tekniska specifikationer

Bambino			
Art. nr:	Bambino	Plattformshöjd (Min-Max)	48 cm -87 cm (utan madrass)
Sovyta / Madrassyta (L x B)	160-190 cm x 85 cm	Sängmått / Yttermått (L x B)	177 cm x 98 cm
Elektrisk spänning	220 / 240 Volt	IP-klassning	IPX4
Matningsspänning	50/60Hz	Produktvikt (utan tillbehör)	130 kg
Max användarvikt	150 kg	Säker arbetslast (SWL)	180 kg
Driftsperiod	2 minuter på / 18 minuter av	Batteribackup	Ja

Positioner:

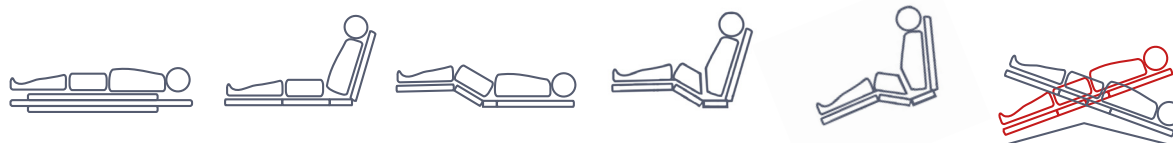

*We improve freedom of movement
and quality of care for people.*

