



Kompakt

Maxvikt 160 kg

Hopfällbar



En perfekt lyft för många olika situationer

Diana II är en mycket stabil, eldriven mobil lyft med ett kompakt, hopfällbart underrede som gör lyften perfekt för begränsade utrymmen. Vi har många olika lyftselar som kan användas tillsammans med den här mobila lyften.



Diana II ger stöd åt brukaren vid lyft från sängen, i/ur en rullstol, till/från toalettstolen och även vid lyft från golvet. Tack vare sitt kompakta utförande är Diana II ett perfekt hjälpmedel i situationer där utrymmet är begränsat, till exempel i hemmet, smala dörröppningar och sanitära utrymmen. Det är också en fördel i utrymmen där det redan står andra hjälpmedel på golvet. De stora och slitstarka hjulen gör lyften lättmanövrerad.

Olika lyftalternativ

Diana II levereras med lyftbygel eller manuell fyrpunktsbygel. Lyftbygeln har ögelfästen som öglorna på våra selar fästs i. Den manuella fyrpunktsbygeln har fästpunkter som E-clipset på våra selar kan fästs i. Bygeln som finns kan användas i tre olika lägen beroende på om brukaren ska lyftas liggande, halvsittande och sittande. En unik egenskap hos våra selar är att de fästs med E-clips.

E-clipset är ett välbeprövat selfäste för mobila lyftar som minskar risken för fel avsevärt. Clipset läggs runt lyftbygelns fästpunkt och låser sig med ett tydligt klickljud. Våra selar ger optimalt stöd för extra pålitliga, bekväma och säkra lyft.



Rollatore



Ultralåga sängar



Lyftlösningar



Hygien



Transportstolar

Tillbehör



Full Body Sling E-clip Soft
Ger ett heltäckande stöd och är därmed bekväm och säker för alla användare och situationer. Fästs med hjälp av säkra E-clips eller öglor.
Artikelnummer 25010C-size



Hanger bar 4MSB
Handstyrd lyftbygel med fästen för slingor med e-clips.
Artikelnummer 90558



Hanger bar 2P
Lyftbygel med 2-punktsfäste för selar med fästöglor.
90567 (35 cm)
90557 (45 cm)
90568 (60 cm)



Mjukt bygelskydd
Bygeln kan förses med skydd vid önskemål.
Artikelnummer 50866

Användning




Lyft till/från säng
Används som stöd vid lyft av brukare från sängen och underlättar positionering i sängen.



Från och till stol
Lämpar sig för flytt från och till en (rull)stol och för positionering av brukaren på stolen.



Lyft från golv
Används som stöd vid lyft av brukare från golvet.

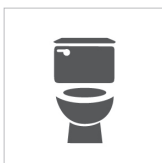

Toalettbesök
Lämpar sig för flytt till och från toalettstolen.


Egenskaper



Hjul
2 bromsade hjul (Ø 100 mm) bak och 2 dubbla, obromsade hjul (Ø 75 mm) fram.



Handkontroll
Intuitiv handkontroll som är enkel att använda och ergonomisk att hålla i (1x manuell benspridning MLA/1x elektrisk benspridning ELA).

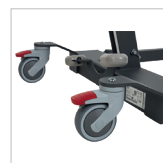

Fotpedal
Fotpedal för manuell benspridning (MLA).



Körhandtag
Stort stöd- och vändhandtag som ger brukaren möjlighet att hålla fast sig på ergonomisk höjd. Loopformat vilket förhindrar att kläder och selar fastnar.

Tekniska specifikationer

Specifikationer	Diana II ELA, 90556 med Hanger bar 2P	Diana II ELA, 90556 med Hanger bar 4MSB
Underredets längd	1 280 mm	1 280 mm
Underredets bredd	620 mm	620 mm
Stativets höjd	1 360 mm	1 360 mm
Minimibredd underrede (insida–utsida)	490–610 mm	490–610 mm
Maxbredd underrede (insida–utsida)	1 000–1 120 mm	1 000–1 120 mm
Lyftintervall	720–1 940 mm	720–1 940 mm
Vändradie	1 400 mm	1 400 mm
Underredets höjd	95 mm	95 mm
Hjuldiameter	100 mm (bak)/ 75 mm (fram)	100 mm (bak)/ 75 mm (fram)
Egenvikt	45 kg	50 kg

Specifikationer	Diana II ELA, 90556 med Hanger bar 2P	Diana II ELA, 90556 med Hanger bar 4MSB
Maximal lyftkapacitet	160 kg	160 kg
Rotation lyftbygel	360°	360°
Laddningsbart batteri (inkl. laddningskabel)	Kapacitet 2,9 Ah	Kapacitet 2,9 Ah
Ramens material	Pulverlackerat stål	Pulverlackerat stål
Nödläge	Ja	Ja
Handkontrollens funktioner	Höj/sänk, benspridning, batteristatus, serviceindikator	Höj/sänk, benspridning, batteristatus, serviceindikator
Certifiering	CE, ISO 10535	CE, ISO 10535



Vi ger människor större rörelsefrihet och bättre vårdkvalitet.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE GERMANY

Industriestraße 13, Gebäude 1/9
63755 Alzenau
+49 (0) 6023 994 936 8
info.de@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 512 76 7199
info.us@humancaregroup.com