


High Basic Sling

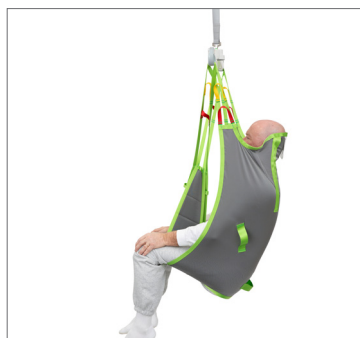

High Basic Sling

High Basic Sling är en bekväm lyftsele med förstärkningsmaterial i benstöden för att ge bästa komfort vid överflyttningen. Med sin design ger den ett stöd för hela ryggen och ger ett bekvämt stöd för huvudet.

Mycket stöd

High Basic Sling är perfekt för de brukare som behöver mycket stöd och som har låg eller hög tonus. Selen gör förflyttningssituationer trygga för både vårdare och patient och är väl lämpad för att lyfta patienter till och från golvet. För att ge optimalt stöd för huvud och nacke är selen utrustad med två avtagbara lattor.

Två material

High Basic Sling är en bekväm sele som finns i två tygval - Polyester och Polyester Net. Polyesternätmaterialiet tillåter fukt och värme att överföras effektivt från brukaren vilket gör att selen kan lämnas bakom brukaren under en tid efter att överflyttningen är klar. Polyester Net-tyget är flexibelt, luftigt och torkar

snabbt vilket också gör det lämpligt att använda i badmiljöer. High Basic Sling kan användas i de flesta lyftsituationer med en 2-punkts, 3-punkts eller 4-punkts upphängning.

Enkel skötsel och enkel användning

Våra selar är tillverkade enligt högsta kvalitetsstandard. De har förstärkta lyftöglor och höghållfast nylonband runt selen för att göra dem starka nog att motstå även den mest aktiva användningen. Varje lyftseletikett är färgkodad för att säkerställa ett snabbt och enkelt val av rätt lyftsele och lyftöglorna är färgkodade för enkel bestämning av önskad placering.



Gånghjälpmedel



Vårdsängar



Lyftlösningar



Hygienprodukter



Transportstolar

Tillbehör



Förlängningsband

Används för att förlänga lyftbyglarna för att kunna anpassa lyftposition eller för att hålla ihop bendelar. Olika längder. NR.:21180-*



Benpolstring och benstöd

Utmärkt för användare med känslig hud eller som har smärta. Benpolstring, art nr. 21146-S, M och L. Förstyvade benstöd, art. nr. 25102



Bygelpolstring

Det polstrade fodralet skyddar användaren från sammanstötningar med lyftbygeln. Ska inte användas i våta miljöer. Art. nr. 50866



Lyftbyglar för 4-punktsupphängning

Art. nr. 55619 Lyftbygel till 4-punktsupphängning i portabel lyft. Art. nr. 92938 4-punktsbygel till stationär lyft.

Lyftsituationer




Till och från sängen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.




Till och från rullstolen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från rullstolen.

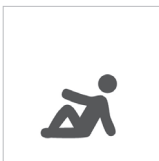

Använd från golvet

Fungerande vid förflyttning från golvet.

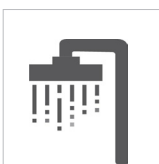

Använd vid duschning


Bara Polyester Nät kan användas för detta.

Skötsel




Polyester

Mjukt, tunt material som andas och torkar snabbt. Idealisk för bad eller duschning.

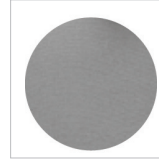

Polyester Net

Hållbar, låg friktion, lätt att rengöra, applicera och ta bort.

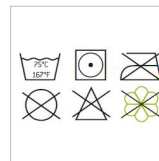


Skötsel

Skötselinstruktioner lokerade på etikett. Använd som sjukhus gradstätt.

Tekniska specifikationer

Artikelnummer		Storlek	Färg	A	B	C
Polyester nät	Polyester					
25037-JS	25032-JS	Junior Small		22 cm	62 cm	67 cm
25037-JM	25032-JM	Junior Medium		28 cm	65 cm	74 cm
25037-S	25073-S	Small		35 cm	77 cm	86 cm
25037-M	25032-M	Medium		40 cm	88 cm	91 cm
25037-L	25032-L	Large		44 cm	98 cm	100 cm
25037-XL	25032-XL	X-Large		48 cm	102 cm	102 cm
25037-XXL	25032-XXL	XX-Large		52 cm	108 cm	107 cm
Max användarvikt: 300 kg						

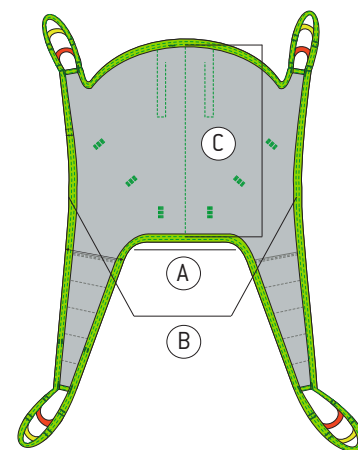

*Tillgänglig i följande längders: 10cm/3.9" (21180-10), 15cm/5.9" (21180-15), 20cm/7.8" (21180-20), 25cm/9.8" (21180-25), 35cm/13.7" (21180-35)

“ Vi förbättrar rörelsefriheten
och kvalitetsomhändertagande av människor

www.humancaregroup.com

